


TANITA

Healthy Habits for Happiness

Vücut Analiz Tartısı

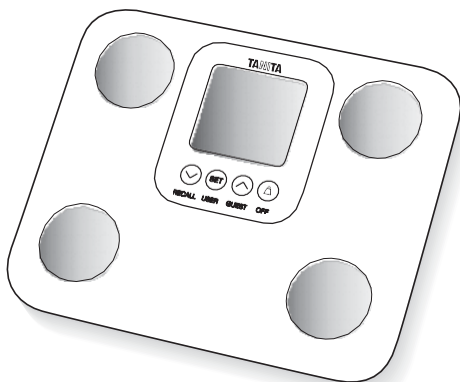

Model: BC-730

KULLANMA KILAVUZU

Model: BC-730

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkürler.

Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ihtiyaç durumunda kullanmak üzere saklayın.

Garanti Belgesi dahildir.

Sunuş.....	4
BC-730 Özellikleri	5
Kullanmadan Önce	6
Saklama Koşulları	
Tartının Set Ayarları	7
Kişisel Bilgilerin Tartıda Saklanması	8-9
Vücut Yağ ve Sıvı Analizi	10-11
Segmental Analiz Rapor Okuması	12
Geçmiş Ölçümler	13
Misafir (Guest) Modu Kullanımı	
Yalnızca Tartım Modu	14
Ağırlık Modu Seçimi / Hata Kodları	
Tüketicinin Seçimlik Hakları	15
Teknik Destek ve Çağrı Merkezi	16
Garanti Şartları	17-18
Garanti Belgesi	19

SUNUŞ

Tanita marka ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkürler. Tercih ettiğiniz tartı, son teknolojik yenilikleri bünyesinde barındırır. Ev kullanımı için geliştirilmiş BC-730, vücudunuzun segmental olarak kapsamlı analizini yapar.

Daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip olmak için www.tarti.com adresini ziyaret edebilir ya da Danışma Hattımızı arayabilirsiniz.

Danışma hattı: 0212 327 10 05 (pbx)



UYARI!

Biyoelektrik Empedans Yöntemi ile ölçüm yapılır. Vücut yağ oranının değerlendirilmesinde en etkili yöntemlerden biri olan Biyoelektrik Empedans Analiz yöntemi, yağın uygulanan elektrik akımına karşı zayıf geçirgen olması esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde vücudun tolere edebileceği düşük düzeyde elektrik akımı verilerek BIA analizatörü tarafından empedans ölçülür.



YASAK

*Kalp pili gibi elektronik tıbbi implantı olan kişilerin vücut analiz tartısını kullanmaması gerektiğini unutmayın.

*7 yaşından küçükler ve hamile kadınlar sadece ağırlık işlevini kullanmalıdır.

*Banyodan ya da yorucu egzersizlerden sonra tartıyı kullanmayın.

*Tartıyı ıslak zemin gibi kaygan zeminlerde kullanmayın.

INNERSCAN'I KİMLER KULLANABİLİR?

18 ve 99 yaş grubu içerisinde kalan yetişkinler Vücut Analiz Tartısını rahatlıkla kullanabilir, 5 ve 17 yaş grubu gençler ise tartının yalnızca kilo ve yağ oranı bilgilerinden faydalanabilirler.

BC-730 ÖZELLİKLER

- Ağırlık
- Vücut Yağ oranı (%)
- İç Organlar Çevresi Yağlanma Oranı
- Vücut Sıvısı (%)
- Kas kütlesi (kg)
- Kemik Ağırlığı (kg)
- Bazal Metabolizma Hızı (kJ - kcal)
- Vücut Kitle İndeksi (BMI)
- Metabolik Yaş
- Fiziksel Aktivite Derecesi (1-9)
- Misafir Ölçüm Modu
- Atletik Ölçüm Modu
- 150 kg tartım kapasitesi / 100 gr Hassasiyet ile Ölçüm
- Kişisel Bilgilerinizi Saklamak için 5 Adet Hafıza
- Sadece Baskül Olarak Kullanılabilme Özelliği
- Kişisel Bilgilerinizi Saklamadan Çoklu Bilgi Girişi İçin Misafir Tuşu
- Yağ Oranınızın İdeal Yağ Oranı ile Simgesel Karşılaştırılması

ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR

Aşağı Yukarı Seçim Tuşları



RECALL USER GUEST OFF

Kullanıcı ve
Enter Tuşu

Kapama (Sadece
Kilo Ölçüm) Tuşu


Misafir Giriş
Tuşu



Aksesuarlar
AA-Kalem Pili (4)

Ön Ayak Elektrotları

Dijital Ekran

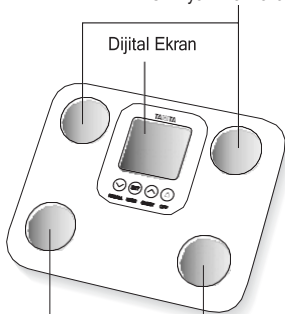

Ayak - Topuk Elektrotları

KULLANMADAN ÖNCE


- **Pilleri tartıya yerleştiriniz.**

Pilleri şekilde görüldüğü gibi tartının alt bölümünde yer alan pil yatağına yerleştiriniz.



Pillerin aynı marka ve aynı voltajda olmasına dikkat ediniz.

Kullanılmış ve eski pilleri kullanmayınız.

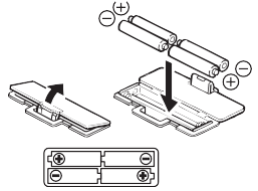

- **Tartınızı düz bir zemine yerleştiriniz.**

Tartınızı yerleştirdiğiniz zemin düz olmalıdır. Tartınızın ayakları yere tam olarak temas etmelidir.

Eğer zemin düz değil ve tartınızın ayakları yere tam temas etmiyorsa sonuçlar hatalı çıkabilir/ ölçüm yapılamayabilir/ tartı "error" verebilir.



Tartınızı ıslak ve eğimli zeminlerde kullanmayınız.

Not: Pillerin kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olun. Piller yanlış yerleştirilmişse sıvı sızabilir ve zemine zarar verebilir. Tartınızı uzun süre kullanmayacaksanız, saklamadan önce pillerin çıkarılması tavsiye edilir.



SAKLAMA KOŞULLARI

Hassas bir ölçüm tartısı olan elinizdeki ürünün en iyi şartlarda saklamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.

- Tartınızı sökmeyiniz, sökmeye çalışmayınız, demonte etmeyiniz.
- Tartınızı yatay olarak zemine yerleştiriniz, tartınızı saklama koşullarına uygun olarak saklayıp, düğmelerin herhangi bir yere temas etmediğinden emin olunuz.
- Tartıyı aşırı yük / baskı ve titreşimden uzak tutunuz.
- Direkt güneş ışığı alan yerlerden, herhangi bir ısı kaynağından uzak tutunuz. Nemli ve aşırı sıcaklık değişiminin olduğu yerlerde saklamayınız.
- Tartıyı suya sokmayınız / yıkamayınız. Elektrotların temizlenmesinde saf alkol veya beze sürülmüş cam temizleyici kullanınız. Sabundan uzak tutunuz.
- Tartıya ıslak ayakla veya platform nemliyen çıkmayınız.
- Tartınızı atmayınız, sert bir şekilde yere koymayınız, üzerine bir şey düşürmeyiniz.
- Tartıyı, el elektrotlarından tutarak taşımayın. El elektrotları ünitesini serbest bırakmayın.

OTOMATİK KAPANMA ÖZELLİĞİ

- Eğer kullanım işlemine, kişisel bilgilerinizi tartıya girdikten sonra veya hafıza tuşlarındaki bilgileri çalıştırdıktan sonra 10-20 saniye süreyle ara verirsiniz tartınız otomatik olarak kapanacaktır.
- Platformun üzerine aşırı yük koyulduğunda veya tartım kapasitesinin üzerinde tartım yapmaya çalıştığınızda tartınız otomatik olarak kapanacaktır.
- Kişisel verilerinizi girerken 60 saniye boyunca herhangi bir bilgi girmez ve/veya herhangi bir tuşa basmazsanız tartınız otomatik olarak kapanacaktır.
- Tartınız ölçme işlemini tamamladıktan sonra 30-60 saniye arasında otomatik olarak kapanacaktır.

DOĞRU SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN


- En doğru ölçümler için günün hep aynı saatinde aynı koşullarda yapılması önerilir.
- Ölçümlerden doğru sonuçlar elde etmek için ölçümler elbisesiz, çıplak ve kuru ayaklarla yapılmalıdır.
- Yataktan kalktıktan, yemeklerden ve aşırı sıvı alımından, spor yaptıktan ortalama üç saat sonra,
- Banyo, sauna ve yüzmeden önce,
- Tuvalete gittikten sonra,
- Uzun uçak, otobüs vb. yolculukların tercihen ertesi günü,
- Günün hep aynı saatinde ve aynı koşullarda yapılacak ölçümler, en doğru ölçümler olacaktır. İlerlemeyi takip edebilmeniz için, belirli bir süre boyunca aynı koşullar altında alınan kilo ve vücut yağ yüzdesini karşılaştırabilirsiniz.
- Topuklarınız elektrotlara şekilde görüldüğü gibi yerleştirmelidir.
- Ayaklarınızın büyük olması önemli değildir, ayak parmaklarınız tartının dışına taşsa bile önemli olan topukların düzgünce yerleştirilmesi doğru ölçüm için önemlidir.



TARİH VE ZAMAN AYARLARI

1 Tarih Ayarlama:

Pili tartıya yerleştirin ve başlatmak için AÇMA/KAPAMA tuşuna basın, AŞAĞI/YUKARI tuşların yardımı ile tarihi ayarlayın ve ardından 'SET' tuşuna basınız. Onaylandığında bir kere 'bip' sesini duyacaksınız.

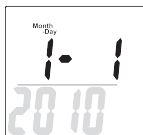

2 Ay Ayarlama:

AŞAĞI/YUKARI tuşların yardımı ile ayı ayarlayınız ve 'SET' tuşuna basınız. Onaylandığında bir kere 'bip' sesini duyacaksınız.



3 Gün Ayarlama:

AŞAĞI/YUKARI tuşların yardımı ile günü ayarlayınız ve 'SET' tuşuna basınız. Onaylandığında bir kere 'bip' sesini duyacaksınız.



4 Saati Ayarlama:


AŞAĞI/YUKARI tuşların yardımı ile saati ayarlayınız ve 'SET' tuşuna basınız. Onaylandığında bir kere 'bip' sesini duyacaksınız.



5 Dakika Ayarlama:

AŞAĞI/YUKARI tuşların yardımı ile saati ayarlayınız ve 'SET' tuşuna basınız.

Tartı programı onaylandığında 2 kere 'bip' sesi gelecek ve ardından da otomatik olarak kapanacaktır

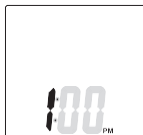

Not:

*Pilleri değiştirme veya söküp takma işlemi olursa yukarıdaki işlem girişlerinin yeniden yapılması gerekecektir.

*Ortalama 60 sn hareketsiz durmak tartının otomatik kapanmasına neden olacaktır. Sonucunda hiçbir bilgi kaydedilmeyecektir.

*İşlem sırasında yanlış tuşlama yaparsanız ya da programlamayı tamamlamadan önce tartıyı kapatmak isterseniz kapatmak için 'OFF' tuşuna basınız. Bu durumda hiçbir veri kaydedilmeyecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN TARTIDA SAKLANMASI

Tartı sadece kişisel verilerin kaydedilmesine dair programlanması ile kayıt işlemini gerçekleştirecektir.

1. Açmak için SET tuşuna basınız. Ekranda “12345” gösterilecektir.

2. AYARLARA BAŞLAYINIZ:

Set tuşuna basınız. Tartı aktivasyon tamamlandığında ‘bip’ sesi gelecektir. Kişisel kayıt numarası görüntülenecektir.

Not: İşleme 60 saniye zarfında başlamazsanız tartı kendi kendini otomatik olarak kapatacaktır.

Not: Yanlış veri girerseniz ya da kaydetmekten vazgeçerseniz lütfen açma/kapama tuşuna basınız.

3. KİŞİSEL KAYIT BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ:


Kişisel kayıt numarası seçimi: AŞAĞI/YUKARI tuşları ile 1-5 arası bir kayıt numarası seçiniz. Seçimi tamamlamak için ‘SET’ tuşunu kullanınız. Onaylamanın ardından ‘bip’ sesini duyacaksınız.



4. YAŞINIZI GİRİNİZ:

AŞAĞI/YUKARI tuşlarını kullanınız. Tarihi (Yıl/ Ay/ Gün) girdikten sonra onaylamak için ‘SET’ tuşuna basınız. Onaylamanın ardından ‘bip’ sesini duyacaksınız.

Not: Yaş aralığı 5-99’dur.

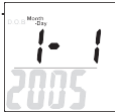

5. CİNSİYETİNİZİ GİRİNİZ:


AŞAĞI/YUKARI tuşlarını kullanarak kadın (♀), erkek (♂), atletik kadın (♀&T), atletik erkek (♂&T), seçeneklerinden birini seçiniz. Onaylamak için ‘SET’ tuşunu kullanınız. Onaylamanın ardından ‘bip’ sesini duyacaksınız.



6. BOYUNUZU GİRİN

Ekran varsayılan olarak 170 cm'dir (5' 7,0") (Boy aralığı 90 cm - 220 cm veya 3' 0,0" - 7' 3,0").

Boyunuzu girmek için AŞAĞI/YUKARI tuşlarını kullanın ve ardından AYARLA düğmesine basın. Ünite onaylamak için bir kez 'bip' sesi çıkaracaktır. Ekran, onaylamak için kişisel verileri bir kez gösterir, ardından ekran "0.0" gösterir ve ölçüm için hazırdır.

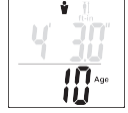

7. AĞIRLIK VE VÜCUT YAĞ ÖLÇÜMÜ:

Ekranla bir müddet kişisel bilgileriniz gözükür ve daha sonra "0.0" görünür. Tartınız ölçüme hazırdır.

Tartınızın üzerine çıplak ayak ile çıkın ve yağ% görene kadar inmeyiniz.



Okumalar 40sn boyunca ekranda görünecek ve daha sonra bilgileriniz kaydedilip tartı kapanacaktır.

Not: Eğer tartınızın üzerine "0.0" belirmeden çıkarsanız, tartınız size hata verecektir. Ayrıca ekranda "0.0" belirdikten 30sn içinde tartıda bir işlem yapılmaz ise otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Eğer hafızaya kayıtlı bilgilerinizden, değişik yapmak isterseniz, doğum günü vs. gibi ekranda "Clr" görünecektir. Yukarı/Aşağı tuşları kullanarak "Yes" seçerseniz hafızada saklanacaktır. "No" seçerseniz hiçbir veri saklanmayacaktır. (hafıza silinmeyecektir).



Kişisel verileri programladıktan sonra okumaya hazırsınız.


1. Tartıya çıkın

Tartı kapalıyken tartıya çıkın, terazi otomatik olarak açılır ve ölçüm almaya başlar.



2. Sonucunuzu alın

- Ölçüm alındıktan sonra, sonuçlar aşağıda listelenen sırayla otomatik olarak görüntülenecektir.
- Son ölçüm sonucu görüntüledikten sonra, ağırlık ve Vücut Yağ %si tekrar görünecek, ardından tartı otomatik olarak kapanacaktır.
- Kullanıcı, önceki sonuçları görmek için <Yukarı> düğmelerini kullanabilir.
- Gelişmiş kaydırma için, kullanıcı <Yukarı> düğmesini basılı tutabilir.
- Ölçüm alındıktan sonra sonucu görüntülemek için bekleyin. Tartı otomatik olarak kapanmadan
- 40 saniye önce görülecektir.

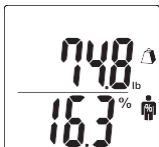

Ekranda farklı numaralı profil görünüyorsa.

SET butonunu kullanarak kendi profilinizi bulabilirsiniz. Doğru profili seçip 4 sn bekledikten sonra, ekranda numaranız görünecektir. Ölçüm sonuçlarınız kendi profilinizde kaydedilecektir.



Eğer "DEL" seçeneğini seçerseniz, hiçbir okuma hafızaya kaydedilmeyecektir.

Not: Çocuklar için (5-17 yaş), tartı yalnızca ağırlık ve vücut yağ yüzdesini gösterecektir (vücut yağ yüzdesini göstermeyecektir).

MİSAFİR (GUEST) MODU KULLANIMI

Verileri hafızaya kaydetmeden bir defalık, ölçüm işlemi yapmaya yarar. Tartıyı etkinleştirmek için "Misafir/Guest" düğmesine basın.

Sonra adımları izleyin: Kişinin; Yaşı, Cinsiyeti (Kadın veya Erkek) ve boy bilgileriniz girin.

Ekranda "0.0" görüldükten sonra, tartı üzerine çıkınız. Kilo tartımı yapıldıktan sonra, vücut yağ% ekranda gösterilene kadar tartı üzerinde ayakta durunuz.

Notlar:

*Eğer tartınızın üzerine "0.0" belirmeden çıkarsanız, tartınız size hata verecektir.

*Vücut yağ% gözüne kadar tartı üzerinden inmeyiniz.

*Ekranda "0.0" belirdikten 30sn içinde tartıda bir işlem yapılmaz ise otomatik olarak kapanacaktır.



SADECE KİLO ÖLÇÜMÜ

Tartınız kapalı iken Ağırlık(Off) tuşuna basın. 2 veya 3 saniye sonra, Ekranda "0.0" görünecektir.

Ekranda "0.0" görüldüğünde, tartı üzerine çıkınız. Vücut ağırlığı değerinizi görünecektir.


Ekran yaklaşık 20 saniye boyunca yanar ve daha sonra güç otomatik olarak kapanacaktır.



AĞIRLIK MODU SEÇİMİ

Tartının, pil yuvasının ilerisinde bulunan, resimde görülen tuşa basarak ağırlık birimini kg / lb / st lb olarak değiştirebilirsiniz.

Not: Sadece bazı modellerde kullanılması için, ağırlık modu anahtarı mevcuttur.

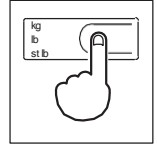

HATA KODLARI

- **“Lo”** simgesi ekranınızda görüyorsanız, piller bitmiş demektir. Bu uyarıyı gördüğünüzde aynı marka ve aynı voltajda piller ile değiştiriniz. Pil gücü düşüklüğü ölçüm kalitenizi etkileyecektir. Kişisel bilgiler pilleri değiştirme esnasında değişmeyecektir.
- **“Err”** simgesi ekranda görünüyorsa ise tartının üzerinde hareketsiz durunuz. Tartı hareketinizi tespit ettiğinde doğru ölçüm yapmaz. Tartı ölçümleme yapamıyor demektir.
- **“---**“ ekranda görünüyorsa, kişisel bilgilerinizi tartıya giriniz. Çoraplarınızı çıkardığınızda ayaklarınızın temiz olduğundan emin olunuz.
- **“OL”** simgesi ekranda görürseniz, tartının tartım kapasitesinden fazla ağırlığa sahipsiniz demektir. Tartım işlemi ve ölçüm işlemi sürdürmeyiniz.
- **“ErrFAT”** simgesini ekranda görürseniz, yağ oranınız %75'in üzerindedir. Bu nedenle tartınız ölçüm yapmaz. Tartım işlemi ve ölçüm işlemi sürdürmeyiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Tartınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Tartıya darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Tartınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen kullanım ömrü 7 senedir.

TAŞIMA VE NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Tartınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya tartının hatalı depolama koşullarından dolayı kırık vb. çıkması durumlarında mağaza içinde satıcıya anında durumu bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir. Tartınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Garanti kapsamı süresinde nakil işlemlerinde (Garanti kapsamı dışında kalmamak için) şirketimizden mutlaka bilgi ve destek alınız.

Gerekirse orijinal ambalaj talebinde bulununuz.

Tartınızı kargo veya posta yoluyla herhangi bir yere gönderirken mutlaka sağlam bir koli içine hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. Ürününüzün orijinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

TEKNİK DESTEK VE ÇAĞRI MERKEZİ

Her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için **0212 327 1005 (pbx)** numaralı telefondan Müşteri İlişkileri Yetkililerimizle görüşebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine!

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde “Yetkili Servis Hizmet Formu” almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Formu, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
5. Azami tamir süresi 20 iş günüdür.
6. Şikâyet ve itiraz başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkân varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMA

Unvanı : TARTI MEDİKAL DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Adresi : Şerifali Mah. Edep Sok. No:27 34775 Ümraniye / İstanbul
Tel : +90 212 327 1005
FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI VE KAŞESİ:

TARTI MEDİKAL
DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Şerifali Mah.Edep Sok. No:27
Ümraniye-İstanbul Tel:0212 327 10 05
Sangazi V.D. 3090066157

Ürünün Cinsi : Vücut Analiz Tartısı
Markası : Tanita
Modeli : BC-545N
Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garanti Süresi : 2 Yıl

SATICI FİRMA

Unvanı :
Adresi :
Tel/Faks :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih-İmza-Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

Bu belgenin hazırlanması; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

Model: BC-730

TANITA

Vücut Analiz Tartısı

Tanita Corporation

Adres: 14-2, 1-Chome, Maeno-Choltabashi-Ku,
Tokyo, 174- 8630, Japan

İthalatçı Firma:

Tartı Medikal Dış. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti.

Tel: +90 212 327 1005

Adres: Şerifali Mah. Edep Sok. No:27 34775 Ümraniye / İstanbul

info@tartı.com | www.tartı.com



TANITA **TARTI**

© Tartı Medikal. Tüm hakları saklıdır.

Olabilecek tipografik hata veya eksik bilgilerden dolayı şirketimizin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.